

- ar vāciņu aizverams un atverams barošanas ports, kas atrodas gastrostomijas zondes galā, lieto uztura, šķidruma un medikamentu ievadei
- balona uzpildes ports, uz kura ir norādīts balona uzpildīšanai nepieciešamais destilētā ūdens tilpums mililitros
- klemme ātrai gastrostomijas zondes noslēgšanai starp barošanas reizēm, lai novērstu kuņģa satura atpakaļnoplūdi
- ārējais fiksācijas disks, kas atrodas 5 mm no ādas, lai gastrostomijas zonde neizkustētos
- balons, kas atrodas kuņģī, lai nodrošinātu gastrostomijas zondes iekšēju fiksāciju
- gastrostomijas zondes maiņa notiek ik pēc 4-6 mēnešiem.

Materiālu sagatavoja Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Paliatīvās aprūpes dienests





ŪDENS MAIŅA GASTROSTOMIJAS ZONDES FIKSĀCIJAS BALONĀ



Aprīkojums ūdens nomaiņai gastrostomijas zondes fiksācijas balonā

- Tukša 5 ml/20 ml šļirce ar Luer Lock savienojumu;
- 5 ml/20 ml šļirce ar Luer Lock savienojumu, kas uzpildīta ar destilētu ūdeni (aq.destilata 10 ml vai novārītu ūdeni);

Svarīgi balonu uzpildīt ar destilētu ūdeni, ievērojot ieteicamo uzpildes tilpumu!

BALONĀ NEDRĪKST LIETOT GAISU VAI FIZIOLOĢISKO ŠĶĪDUMU!

Darbības, lai veiktu ūdens nomaiņu gastrostomijas zondes fiksācijas balonā:

- 1) nomazgā rokas;
- 2) ar roku pietur ārējās fiksācijas disku tā, lai gastrostomijas zonde neizkristu;
- 3) atver klemmi, kas paredzēta kuņģa satura noplūdes novēršanai;
- 4) gastrostomijas zondes balona uzpildes portam, pievieno atbilstoša izmēra tukšu šļirci un, atvelkot šļirces virzuli, piepilda to ar gastrostomas balona saturu, tad uzmanīgi atvieno šļirci;
- 5) gastrostomijas zondes balona uzpildes portam, pievieno šļirci, kas uzpildīta ar ūdeni 5 ml vai 15 ml (nepieciešamais ūdens tilpums norādīts uz balona uzpildes porta), lēnām piepilda balonu un, turot šļirces virzuli, atvieno šļirci;
- 6) aizver klemmi, kas paredzēta kuņģa satura noplūdes novēršanai;
- 7) pārbauda vai fiksācijas balons ir uzpildīts un veic ādas ap gastrostomu novērtēšanu;
- 8) veic ierakstu medicīniskajā dokumentācijā.

Gastrostomijas zonde:

Gastrostomijas zondes izmērs, Fr.	Balona uzpildīšanas tilpums, norādīts uz porta gredzena mililitros, ml
CH 14 / 23 cm (zaļš gals)	5 ml
CH 18 / 23 cm (sarkans gals)	15 ml
CH 20 / 23 cm (dzeltens gals)	15 ml

Materiālu sagatavoja Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Paliatīvās aprūpes dienests




ZEMA PROFILA GASTROSTOMIJAS BALONZONDE ("POGA")

Katrai zema profila gastrostomijas balonzondei ("poga") ir individuāls izmērs un garums.

BRĪDINĀJUMS: "Pogu" lieto tikai kopā ar uztura/ medikamentu ievadīšanas pagarinājuma komplektu.

- "Pogas" maiņu veic ik pēc 6 mēnešiem.

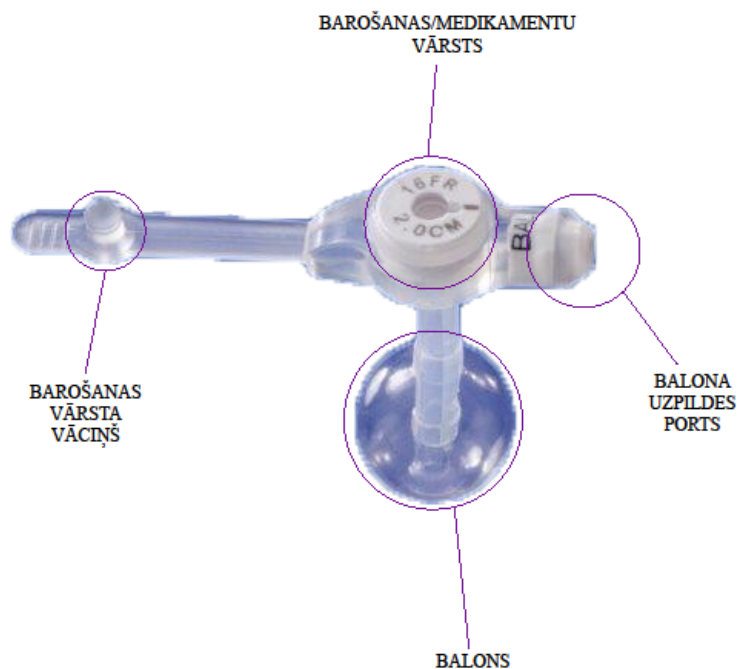


Izmērs	Ieteicamais uzpildes tilpums	Maksimālais uzpildes tilpums
12	3 ml	5 ml
14	5 ml	10 ml
16	5 ml	10 ml
18	5 ml	10 ml
20	5 ml	10 ml
24	5 ml	10 ml

Svarīgi balonu uzpildīt ar destilētu ūdeni, ievērojot ieteicamo uzpildes tilpumu!

BALONĀ NEDRĪKST LIETOT GAISU VAI FIZIOLOĢISKO ŠĶĪDUMU!

Zema profila gastrostomijas balonzonde ("poga")

- balona uzpildes ports
- barošanas vārsta vāciņš
- ar vāciņu aizverams un atverams barošanas vārsts, kas atrodas gastrostomijas zondes galā, lieto uztura, šķidruma un medikamentu ievadei, izmantojot zema profila gastrostomijas balonzondes ("poga") pagarinājuma komplektu
- zema profila gastrostomijas balonzondes ("poga") pagarinājuma komplekti (taisnleņķa, bolus)

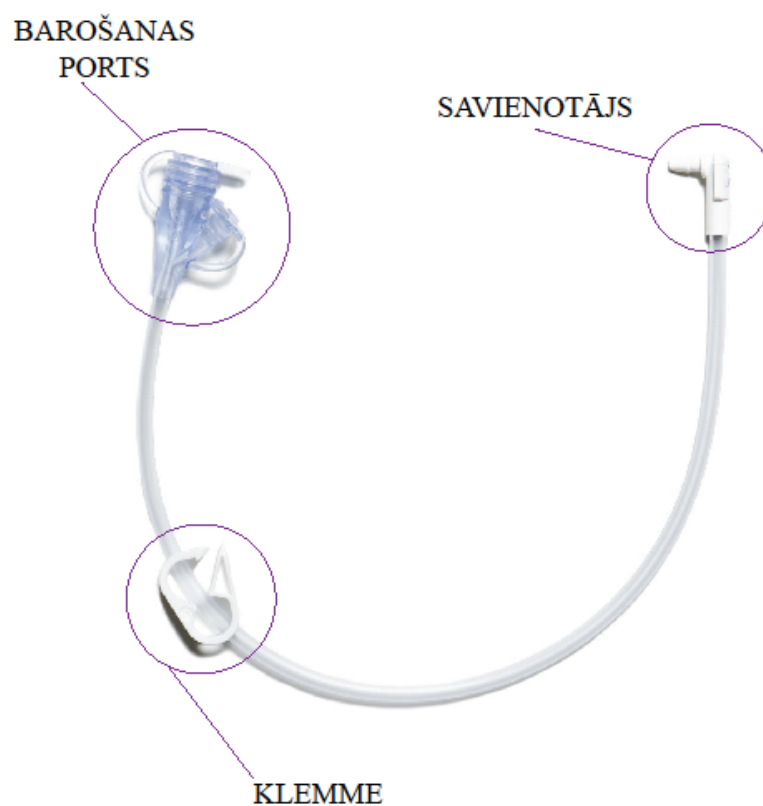

Materiālu sagatavoja Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Paliatīvās aprūpes dienests

